

# Combate por biofrecuencias

***El zapper (término inglés que significa "tiroteo") es un dispositivo electrónico que elimina bacterias, hongos, virus y parásitos alojados en nuestro organismo. Básicamente es un generador de frecuencias biológicas cuyos armónicos superiores destruyen todos los microorganismos patógenos por resonancia.***

De la misma manera que un cristal puede estallar a una frecuencia determinada, los parásitos, hongos, virus y bacterias tienen frecuencias de resonancia establecidas, que al ser atacados con dichas ondas, mueren y son eliminadas por nuestro sistema inmunológico. El zapper no cura, pero al matar el exceso de parásitos, ayuda y facilita al organismo a curarse por sí solo, sin necesidad de químicos o drogas que pueden afectar otros órganos.

El zapper mata hongos, virus, bacterias y parásitos en el organismo por resonancia; pero además actúa incrementando la capacidad de defensa del sistema inmunológico, ya que polariza positivamente las membranas celulares, aumentando su potencial y mejorando así las defensas naturales del organismo.

El zapper, usado diariamente mediante tres aplicaciones de siete minutos, ha probado ser muy efectivo. Las pruebas bioenergéticas, han confirmado el valor de este método una y otra vez. La razón yace en la naturaleza misma del tratamiento. Los practicantes que trabajan con dispositivos bioenergéticos de prueba llegaron a la conclusión de que hay una simbiosis entre diferentes patógenos. Es obvio que ciertas bacterias pueden vivir sobre o dentro de ciertos parásitos; los cuales puedan a su vez alojar otras bacterias o virus. De igual modo sucede con los hongos. A pesar de que este fenómeno puede ser considerado extraño a primera vista, es muy bien conocido en la medicina ortodoxa. Se ha descrito, por ejemplo, que el *Áscaris* puede acomodar decenas de especies de bacterias, como *E.coli*, *Stafilococos*, *Streptococos*, o *Proteus*. Es también sabido que los hongos pueden vivir en los gusanos, como lo sostiene cualquier tratado de microbiología. De este modo, los hallazgos de la investigación clínica y la bioenergía coinciden, lo cual es un reconocimiento a la "medicina del futuro".

## **Régimen de tratamiento con el zapper**

Se debe aplicar el zapper durante siete minutos. Este es el primer tratamiento que matará o debilitará un importante número de bacterias, virus y hongos. El parásito afectado por el tratamiento liberará una cantidad de bacterias, las cuales, el sistema inmunológico deberá enfrentar. Así, después de un descanso de veinte a treinta minutos se deberá efectuar una segunda aplicación de otros siete minutos. Durante este tiempo se produce el mismo mecanismo. La corriente mata las bacterias que fueron liberadas por parásitos, y a la vez las bacterias afectadas liberan virus lo que lleva a una ronda final de siete minutos luego del intervalo necesario de veinte a treinta minutos.

El tratamiento total demora aproximadamente una hora, dependiendo del tiempo asignado a los intervalos y puede llevarse a cabo mientras lee, mira televisión o simplemente descansa. No es significativo que esté en ayunas o que recién haya comido. La única condición es que los electrodos se mantengan aplicados sobre el cuerpo. Para obtener el resultado más efectivo es conveniente efectuar el tratamiento entre las 8 y las 20hs, período en que las células están polarizadas en positivo.

## **Efectos secundarios**

Usualmente no hay efectos adversos cuando se utiliza el Zapper. La corriente que produce es tan débil que no influye en las funciones corporales. Pero advertimos a las personas que llevan marcapasos que no utilicen el zapper, dado que esta alternativa no ha sido investigada. Durante el embarazo también advertimos contra su uso, ya que desconocemos la manera en que los parásitos muertos y toxinas pueden influir en la salud de un nonato. Sin embargo, mujeres embarazadas que lo han utilizado, han afirmado que no obtuvieron resultados negativos, ni en ellas ni en sus niños no nacidos. Pero en rigor, no se han hecho investigaciones sistemáticas en tales casos.

Hay una simple regla práctica: La aparición de leves reacciones como fatiga, sed, pérdida de energía o leves dolores de cabeza constituye un signo positivo, que demuestra que los patógenos están siendo eliminados y el cuerpo reacciona y se desintoxica. Pero si en cambio aparecen fuertes reacciones, esto es signo de que el cuerpo está siendo sobre exigido con la eliminación de toxinas. En estos casos la aplicación debe ser reducida.

La experiencia muestra que los diabéticos (insulino dependientes) pueden experimentar tan drástico cambio en los valores de azúcar en sangre que deben continuar con esta terapia bajo supervisión médica o examinando continuamente sus niveles de azúcar en sangre. Es posible que las aplicaciones de insulina tengan que reducirse rápidamente para evitar una sobredosis.

Atención: El zapper no debe ser utilizado por personas que lleven marcapasos o por mujeres embarazadas. El zapper no reemplaza los tratamientos médicos o un tratamiento para enfermedades graves o una condición amenazante para la vida.

## **EL ZAPPER BIOGEN 2**

El zapper Biogen2 funciona con dos frecuencias (baja y alta) estipuladas por la Dra. Hulda Clark, creadora e investigadora de este revolucionario sistema, que cubren amplios espectros de frecuencias da la mayoría de los microorganismos que nos enferman. Se provee con terminales para conectar a las muñecas (en este equipo los terminales no tienen polaridad) y opcionalmente con terminales para los pies y para mascotas.

Este aparato emite ondas cuadradas de dos frecuencias distintas. Estas frecuencias están especialmente calculadas para cubrir un espectro muy amplio de microorganismos patógenos como hongos, parásitos, virus y bacterias.

Las instrucciones de uso son las siguientes:


- *Coloque las bandas elásticas (1) en las muñecas sin apretar demasiado.*
- *Conecte la ficha plug (2) dentro del terminal (3).*
- *Colóquese los terminales azules (4) sujetados con las bandas elásticas, de modo que el lado del cobre quede en contacto con la piel. Al no tener polaridades, es indistinta la ubicación de los terminales. No tiree del cable para evitar dañar la conexión.*
- *Seleccione la frecuencia a utilizar con la llave (5).*
- *Encienda el interruptor negro (6) hacia arriba. Se encenderá la luz azul (7).*

## **Modos de aplicación**

En la mayoría de los casos, y para gran cantidad de patologías es suficiente utilizar diariamente el siguiente modo:

- *7 minutos en frecuencia baja. 20 a 30 minutos de descanso.*
- *7 minutos en frecuencia alta. 20 a 30 minutos de descanso.*
- *7 minutos en frecuencia alta.*

En casos muy agudos se puede utilizar diariamente:

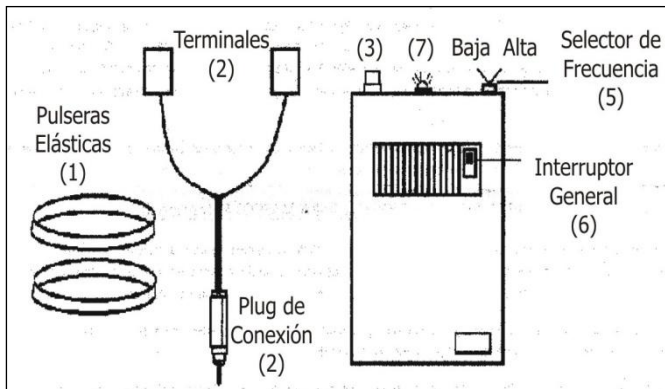

- 7 minutos en frecuencia baja seguidos de 7 minutos en frecuencia alta. 20 a 30 minutos de descanso.

- 7 minutos en frecuencia baja seguidos de 7 minutos en frecuencia alta. 20 a 30 minutos de descanso.

- 7 minutos en frecuencia baja seguidos de 7 minutos en frecuencia alta.

Si la afección se localiza de la cintura hacia arriba, colocar los terminales en las muñecas. Si la afección se localiza de la cintura hacia abajo, pueden sujetarse los terminales en las medias, cerca de los tobillos. En caso de diabetes, puede utilizarse en forma cruzada con un terminal en la muñeca y el otro en el tobillo opuesto.

El Biogen2 funciona con una batería alcalina de 9 volts (no incluida), a la que se puede acceder por el compartimiento posterior para su reemplazo. Como la efectividad del tratamiento depende del estado de la batería, se aconseja reemplazarla cada 30 a 40 días de uso continuo. Mantenga limpia la superficie de cobre de los electrodos con lija suave o esponjita de acero seca. Este dispositivo es un método complementario a cualquier tratamiento recomendado por su médico. No debe abandonar dicho tratamiento por ningún motivo. Por eso puede utilizar el aparato simultáneamente con cualquier terapia.

### Accesorio opcional para mascotas

El dispositivo adicional para mascotas, es un aditamento muy fácil de usar y permite que su perro ó gato pueda desparasitarse continuamente, sin necesidad de estar en reposo ya que puede moverse libremente mientras se realiza el tratamiento. También puede utilizarse para enfermedades vírales, hongos, sarna y muchas otras afecciones. Hemos hecho pruebas con buenos resultados en perros con parvovirus (en menos de 2 días desaparecieron los síntomas) y en parasitosis felinas. Se trata de un collar que tiene unos electrodos en la cara interna del mismo (tipo tachas) que se conectan al aparato sujetando el mismo en el collar. Así, perros o gatos se pueden desparasitar sin necesidad de inmovilizarlos.

Coloque el collar en el tórax ó abdomen de su mascota, cuidando que las tachas queden en contacto con la piel, ajustando levemente y sujetando todo el collar con las cintas "abrojo". Sujete el zapper al collar, mediante el gancho para cinto. Conecte el plug del collar a la ficha del aparato (3). Encienda con el interruptor (6). La duración de los tratamientos es exactamente igual que para las personas.

### Aclaraciones

La ubicación de los electrodos no es importante, aunque normalmente van en la cara interna de la muñeca, es decir donde se toma el pulso. No tiene ninguna contraindicación el

hecho de estar junto a las venas. Lo importante es que haga un buen contacto del cobre sobre la piel, ya que la electricidad con sus frecuencias deben recorrer todo el organismo.

La localización de las afecciones (por debajo o encima de la cintura), es una técnica de la Dra. Clark, pero más que nada indica la posibilidad de ubicar un electrodo en algún lugar específico donde haya dolor, por ejemplo en una rodilla. En ese caso se recomienda colocar los electrodos en los tobillos; otra opción es colocar un electrodo en una muñeca y el otro en la rodilla afectada. Para combatir las parasitosis es suficiente colocarlos en las muñecas, ya que la electricidad llega a todos lados. Además las altas frecuencias recorren las paredes de los órganos, no ingresando al interior de los mismos; por lo cual no afectan a las bacterias benéficas. Siempre se recomienda usar al zapper como complemento del Proceso Depurativo, que emplea otros recursos que llegan específicamente a los parásitos (tinturas, arcilla, homeopáticos, alimentos, oxígeno).

En diabetes, la Dra. Clark tuvo excelentes resultados usando los electrodos en forma cruzada (muñeca-tobillo). Esto está en relación con los meridianos que activa dicha disposición de los electrodos. Gente con diabetes II experimentó con esta posición, obteniendo muy buenos resultados. Según la Dra. Clark, el *Eurytrema Pancreaticum* es uno de los factores causales de la diabetes II. En estos casos, se sugiere cruzar los electrodos en las tres aplicaciones de 7 minutos. En la primera aplicación se colocan en muñeca derecha/tobillo izquierdo, en la segunda: muñeca izquierda/tobillo derecho y en la tercera se vuelve a la primera opción.

No es necesario estar en reposo durante los 7 minutos de aplicación. Hay gente que lo usa mientras viaja en medios de transporte, hace otras tareas o mientras come, aunque no sea lo más conveniente.

### EL CONTEXTO DEPURATIVO

El desparasitado es un trabajo periódico y permanente, ya que estamos en continuo contacto con nuestros depredadores naturales. La periodicidad de estas prácticas y la calidad de nuestra nutrición, determinarán el grado de invasión parasitaria con el cual convivimos y las consecuencias que experimentamos. Desparasitar es siempre bueno y todos lo necesitamos. Pero si uno sólo desparasita (sea con hierbas, alimentos o frecuencias), estará generando **mortandad de parásitos** y este **materias tóxicas** debe ser administrado por **órganos ya colapsados** a causa de la invasión parasitaria que se combate. Por ello la necesidad de contar con **órganos depurativos limpios y bien funcionales**.

En este sentido, es clave la adopción del Proceso Depurativo, método integrado de prácticas sinérgicas y complementarias entre sí. Por ello la recomendación de limpiar órganos (intestinos, hígado, riñones), depurar fluidos internos (sangre, linfa), oxigenar el medio interno (respiración profunda, movimiento físico, uso del agua oxigenada), hacer pausas digestivas (jornada semanal frutal) y adoptar una alimentación fisiológica (frutas, hortalizas y semillas activadas, preferentemente en crudo).

Siguiendo con el razonamiento anterior, poco sentido tiene **matar parásitos** si al mismo tiempo estamos **estimulando su desarrollo** a través de una **alimentación ensuciante** con lácteos, harinas, refinados, carnes, almidones, exceso de cocidos, carencia de oxígeno, etc. Este enfoque nos obliga a ser responsables con lo que hacemos o dejamos de hacer; **somos nosotros los que manejamos la intensidad y la eficiencia de un proceso depurativo**.



**Productos PRAMA**  
Villa de Las Rosas  
Traslasierra (Córdoba)  
**(03544) 494.054**  
Envíos a todo el país  
ventas@prama.com.ar

